



## Jukkensysteem

Voor eilandtafels

## TAFELSYSTEMEN

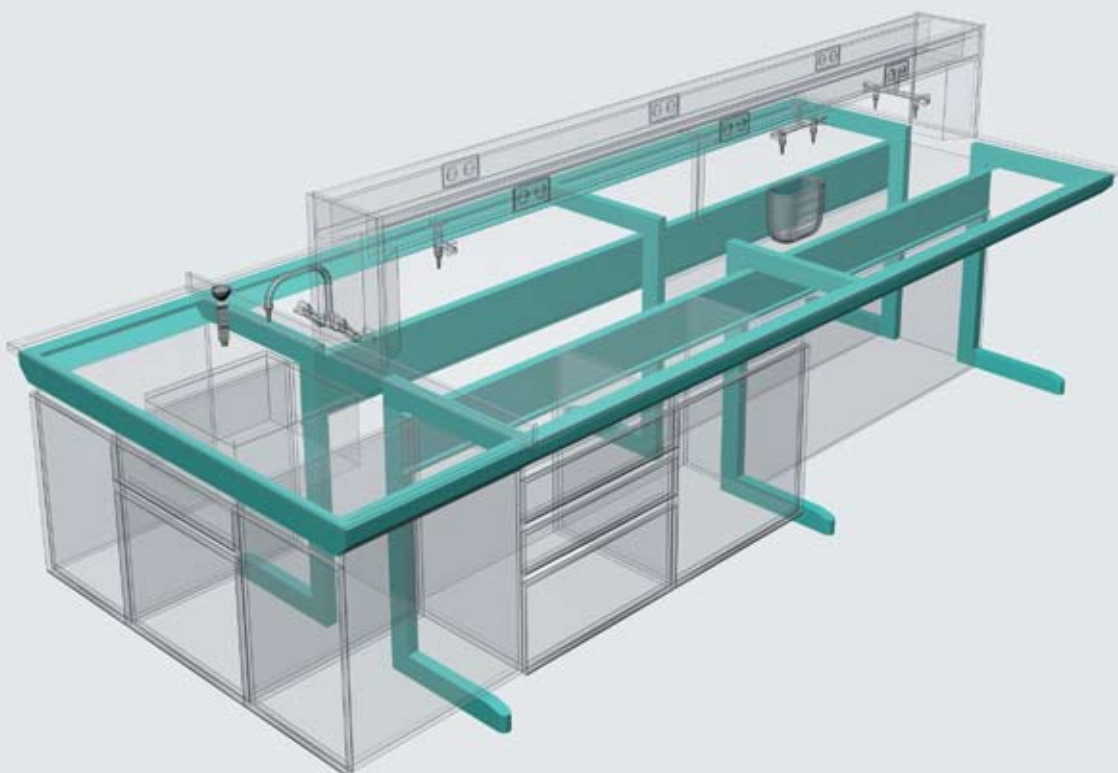

Flexibel, fraai en stevig interieursysteem waarmee iedere cm<sup>2</sup> laboratoriumruimte benut kan worden. Het systeem vormt de basis voor de montage van mediagoten, spoelunits en werkbladen voor het werken op sta- en/of zithoogte. De onderkasten worden hangend aan het frame gemonteerd en zijn over de volle lengte te verschuiven waardoor werkplekken op flexibele wijze kunnen worden samengesteld. Tafels met het jukkensysteem hoeven niet aan de vloer gemonteerd worden.

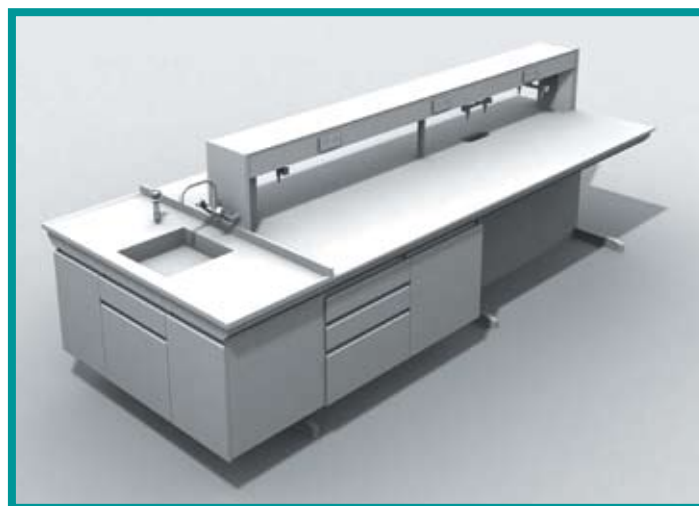

# Het jukkensysteem

UITVOERINGEN	wandtafel	wandtafel	wandtafel	eilandtafel
werkhoogte (mm)	zit 780	zit 780	zit 780	zit 780
	sta 930	sta 930	sta 930	sta 930
diepte (mm)	615	750	900	1500
lengte (mm)	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600
	maximaal onbeperkt	maximaal onbeperkt	maximaal onbeperkt	maximaal onbeperkt
vrije ruimte tot de vloer (mm)	zit 680	zit 680	zit 680	zit 680
	sta 830	sta 830	sta 830	sta 830
afstand tussen jukken	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600
onderling (mm)	maximaal 1500	maximaal 1500	maximaal 1500	maximaal 1500

SPECIFICATIES	
metaalwerk afwerking	geëpoxeerd staal
frame kleur	lichtgrijs RAL 7035
type C-vormig jukframe constructie	jukken met polypropylene vloerafdichting en voor- en achterregels
voorregel	ergonomisch vorm gegeven t.b.v. zittend werk
draagvermogen frame	tot 100 kg/m <sup>2</sup>
draagvermogen met heavy duty juk	tot 250 kg/m <sup>2</sup>
optie I	kunststof vloerslof afgekit op de vloer
optie II	bevestiging aan de vloer door middel van chemische ankers
optie III	kopspoelunits

Kijk voor een virtuele presentatie van onze tafelsystemen op [www.splusb.nl](http://www.splusb.nl)