


Kolomsysteem

Voor eilandtafels

TAFELSYSTEMEN

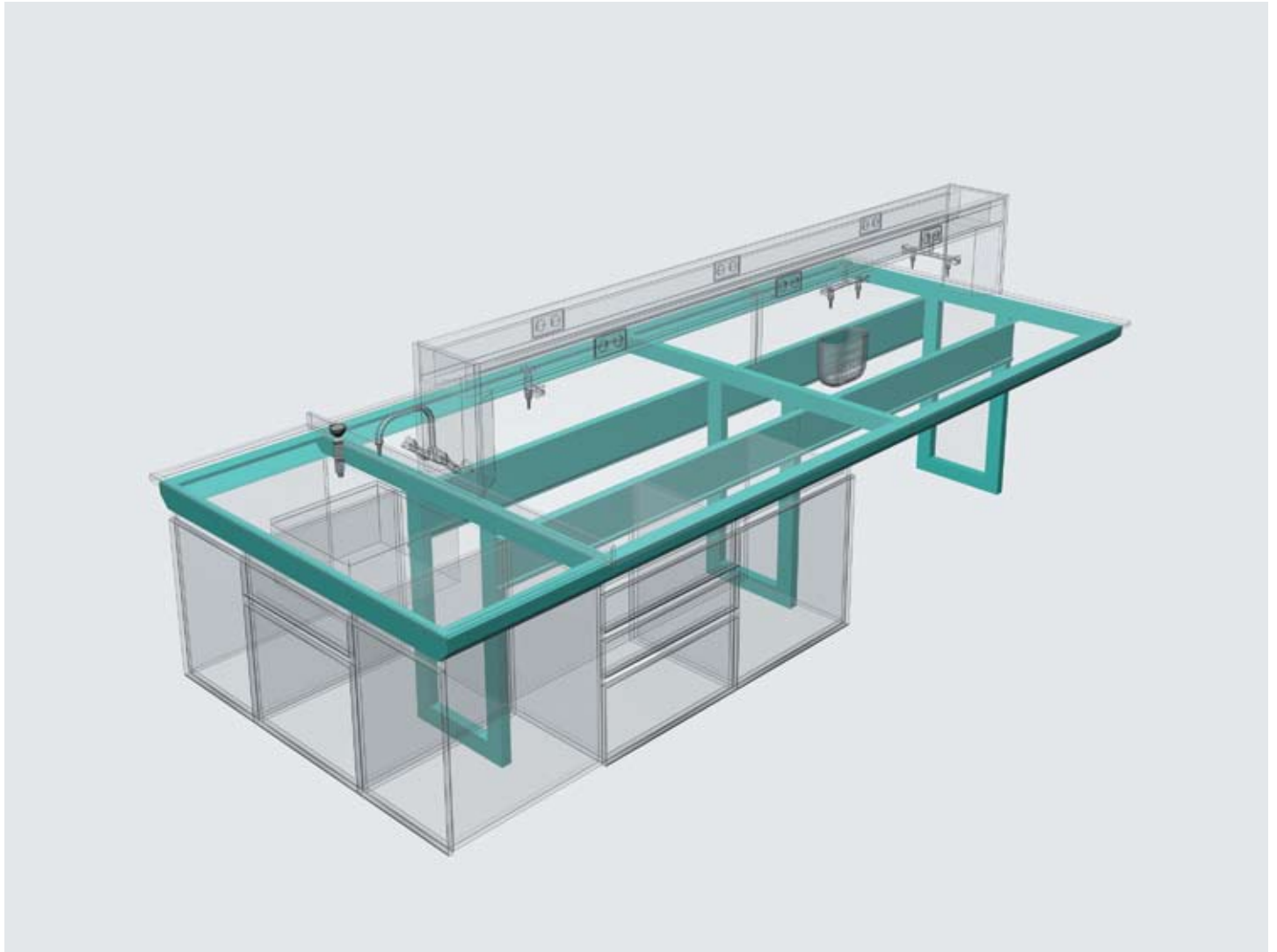

Met het kolomsysteem wordt het gebruik van het vloeroppervlak tot een minimum beperkt. Het systeem vormt de basis voor de montage van mediagoten, spoelunits en werkbladen voor het werken op sta- en/of zithoogte. De onderkasten worden hangend aan het frame gemonteerd en zijn over de volle lengte te verschuiven waardoor werkplekken op flexibele wijze kunnen worden samengesteld.



Het kolomsysteem

UITVOERINGEN	wandtafel	wandtafel	wandtafel	eilandtafel
werkhoogte (mm)	zit 780	zit 780	zit 780	zit 780
	sta 930	sta 930	sta 930	sta 930
diepte (mm)	615	750	900	1500
lengte (mm)	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600
	maximaal onbeperkt	maximaal onbeperkt	maximaal onbeperkt	maximaal onbeperkt
vrije ruimte tot de vloer (mm)	zit 680	zit 680	zit 680	zit 680
	sta 830	sta 830	sta 830	sta 830
afstand tussen kolommen	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600
onderling (mm)	maximaal 1500	maximaal 1500	maximaal 1500	maximaal 1500

SPECIFICATIES	
metaalwerk afwerking	geëpoxeerd staal
frame kleur	licht grijs RAL 7035
type kolomframe constructie	kolom met polypropylene vloerafdichting en voor- en achterregels
voorregel	ergonomisch vorm gegeven t.b.v. zittend werk
kolomframe bevestiging	d.m.v. chemische ankers, 100 mm dikke beton vloer vereist
kolomframe bevestiging aan de wand	gemetselde muur, min 1 steens of bij holle scheidingswanden voldoende achterhout
draagvermogen	tot 100 kg/m ²
optie I	kunststof vloerslof afgekit op de vloer
optie II	kopspoelunits

Kijk voor een virtuele presentatie van onze tafelsystemen op www.splusb.nl