


Jukkensysteem

Voor wandtafels

TAFELSYSTEMEN

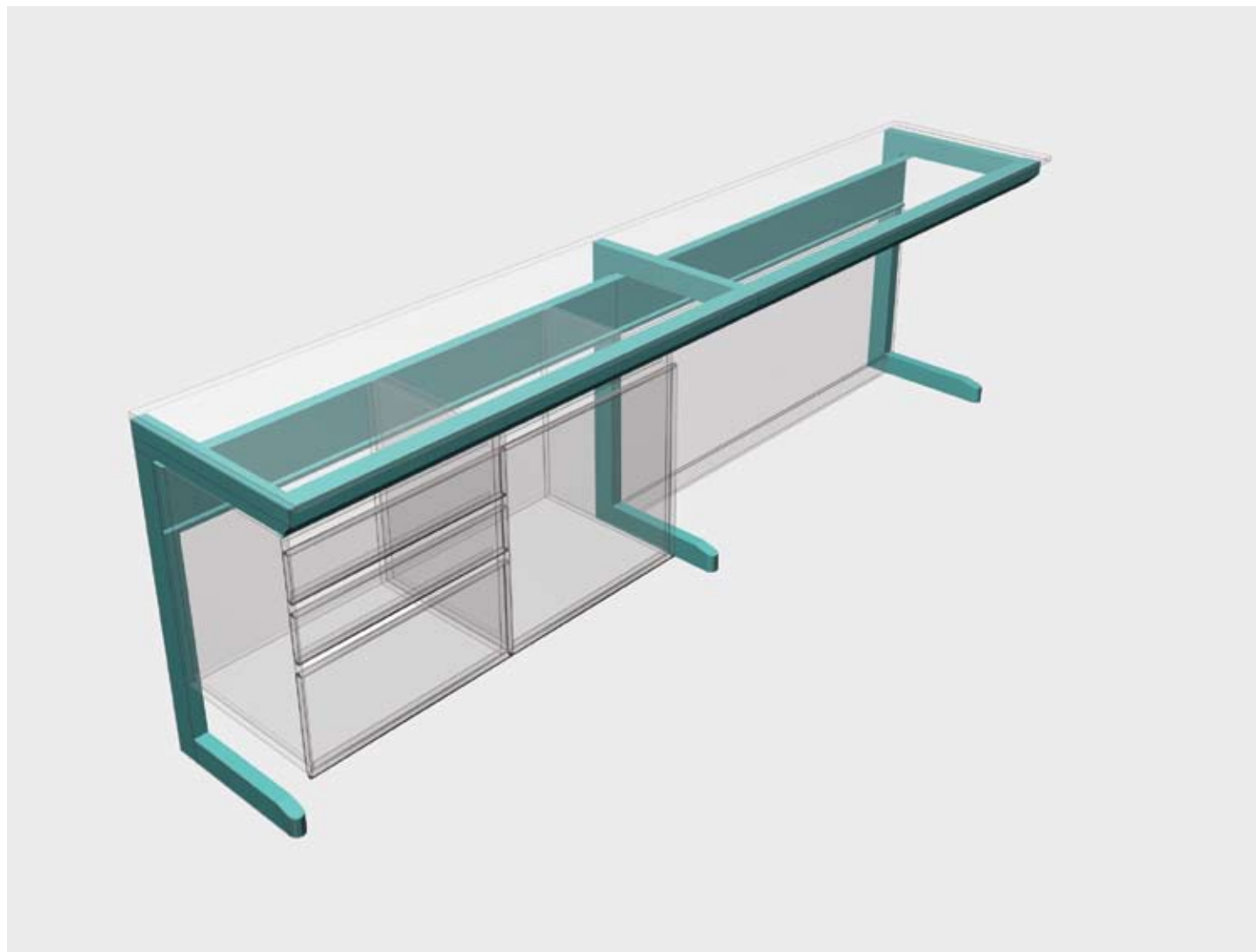

Het onderstel voor wandtafels is een modulaair systeem dat in principe overal kan worden toegepast. Het wordt los op de vloer en tegen de wand geplaatst en stelt hieraan geen eisen. Indien gewenst kunnen de vloersloffen van de jukken onzichtbaar aan de vloer bevestigd worden. Voor ruimten waar aan de hygiëne hoge eisen worden gesteld is het mogelijk de kunststof vloersloffen aan de vloer af te kitten. Jukken worden gekoppeld met voor- en achterregels en vormen daarmee de onderconstructie van de tafels. Onder de tafels kunnen naar wens onderkasten gemonteerd worden die over de volledige tafellengte onafhankelijk van de jukken verschoven kunnen worden.



Het jukkensysteem

UITVOERINGEN	wandtafel	wandtafel	wandtafel	eilandtafel
werkhoogte (mm)	zit 780	zit 780	zit 780	zit 780
	sta 930	sta 930	sta 930	sta 930
diepte (mm)	615	750	900	1500
lengte (mm)	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600
	maximaal onbeperkt	maximaal onbeperkt	maximaal onbeperkt	maximaal onbeperkt
vrije ruimte tot de vloer (mm)	zit 680	zit 680	zit 680	zit 680
	sta 830	sta 830	sta 830	sta 830
afstand tussen jukken	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600
onderling (mm)	maximaal 1500	maximaal 1500	maximaal 1500	maximaal 1500

SPECIFICATIES	
metaalwerk afwerking	geëpoxeerd staal
frame kleur	lichtgrijs RAL 7035
type C-vormig jukframe constructie	jukken met polypropylene vloerafdichting en voor- en achterregels
voorregel	ergonomisch vorm gegeven t.b.v. zittend werk
draagvermogen frame	tot 100 kg/m ²
draagvermogen met heavy duty juk	tot 250 kg/m ²
optie I	kunststof vloerslof afgekit op de vloer
optie II	bevestiging aan de vloer door middel van chemische ankers

Kijk voor een virtuele presentatie van onze tafelsystemen op www.splusb.nl